

Vernipoll srl opera con successo dal 1980 nel mercato degli arredamenti in Italia e all'estero con una propria produzione e una rete commerciale/distributiva. L'affidabilità, la robustezza e la sicurezza dei prodotti sono garantite attraverso la certificazione ISO 9001:2000 e conferiscono ai nostri arredi un carattere inconfondibile.

Vernipoll srl работает на рынке медицинской мебели с 1980 года. Благодаря собственному производству и обширной коммерческой сети фабрика активно действует как на ранке Италии, так и других стран. Надежность, долговечность и безопасность нашей продукции гарантированы сертификатом ISO 9001:2000 и являются ее отличительными характеристиками.



06031 Bevagna (PG) - ITALY  
 Via dell'Artigianato, 3  
 tel +39 0742 360549  
 fax +39 0742 360043  
 vernipoll@vernipoll.com  
 www.vernipoll.com



*Ministero della Salute*

Iscrizione Reg. repertorio dispositivi medici S.S.N.

L'azienda si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche, migliorie e tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.  
 Фабрика оставляет за собой право, без предварительного предупреждения, вносить в свою продукцию любые изменения технические и/или эстетические, производя улучшения которые сочтет необходимыми.

ART DIRECTION: AF-DESIGN - PHOTO: As color - DESIGNERS: *DESIGNI DOTTI & GIOIOLI*



Ambulatori/Амбулатории





## Ambulatori

Componibilità, funzionalità, design

La nostra serie rinnovata di articoli per l'arredo di ambienti per ambulatori e studi medici è caratterizzata da una linea semplice e curata nei dettagli che contribuisce a creare un ambiente accogliente e polifunzionale.

## Амбулатории

Комбинируемость, функциональность, дизайн

Наша обновленная серия изделий для оформления интерьера амбулаторий и медицинских кабинетов отличается простой, четко отработанной в деталях линией, помогающей создавать уютную и многопрофильную атмосферу.



*La cura di ogni dettaglio*

*Отработка каждой детали*





# Ambulatorio MEDICO

## Амбулаторная мебель




### N07-E512 Scrivania con gambe metalliche regolabili in altezza

Struttura - Realizzata con profilati metallici è regolabile in altezza da 62 a 82 cm  
 Piano - In nobilitato melaminico spessore di 30mm ad alta resistenza con finitura opaca antigraffio e bordo in ABS stondato su tutto il perimetro  
 Optional - Pannello frontale (modesty panel)

#### Письменный стол с регулируемыми по высоте металлическими ножками

Конструкция - Выполнена из металлических профилей, регулируется по высоте от 62 до 82 см  
 Top - Из меламиновой плиты толщиной 30 мм высокой прочности, с матовым нецарапающимся покрытием, закругленной кромкой из АБС по всему периметру  
 Опция - Фронтальная панель

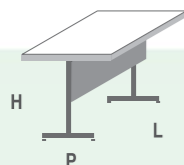

	L	P	H
N07-E512	120	80	62/82
N07-E514	140	80	62/82
N07-E516	160	80	62/82
N07-E518	180	80	62/82


### N07-E183 Cassettiera su ruote con 3 cassetti

Struttura/Top/Cassetti - In nobilitato melaminico ad alta resistenza con finitura opaca antigraffio con bordi perimetrali in ABS da 2 mm arrotondato  
 Ruote - Piroettanti con carter e doppio battistrada in PVC rigido

#### Тумба подкатная с 3 ящиками

Конструкция / топ / ящики - Из высокопрочной меламиновой плиты с матовым нецарапающимся покрытием, закругленными кромками из АБС 2 мм по всему периметру

Колёса - Поворотные с картером и двойным протектором из жёсткого ПВХ

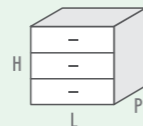

	L	P	H
N07-E183	56	42	60
N07-E185	56	42	60

### N07-E185 Cassettiera su ruote con 3 cassetti con cassetto cancelleria


Тумба подкатная с 3 ящиками и с канцелярским ящиком

### N07-E6312 + E6320 Libreria con ante in legno nella parte inferiore e ante in vetro con telaio in alluminio nella parte superiore

Struttura - In nobilitato melaminico, base con piedini livellatori  
 Ante - In nobilitato melaminico bordate in ABS e in vetro temperato con telaio in alluminio. Serratura di serie con chiave pieghevole  
 Ripiani - In nobilitato melaminico

#### Книжный шкаф с деревянными створками спереди и стеклянными створками в алюминиевой раме сзади

Конструкция - Из меламиновой плиты, основание с регулируемыми по высоте опорными ножками  
 Дверцы - Из меламиновой плиты с кромкой АБС и с закаленным стеклом в алюминиевой раме. Серийный замок со складным ключом  
 Полки - Из меламиновой плиты

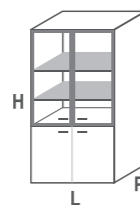

	L	P	H
N07-E6312 + E6320	90	44	203,4



### 17-PT425 Poltroncina operativa schienale alto contatto permanente struttura grigia

Sedile e Schienale - Imbottiti in poliuretano espanso densità 40  
 Elevazione - Tutte le colonne a gas sono conforme alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.  
 Meccaniche - A Contatto permanente in acciaio, ricoperto in poliuretano. Permette la regolazione in altezza e profondità della seduta. Schienale regolabile con volantino  
 Braccioli - In plastica grigia  
 Basamento - In polipropilene e carter grigio  
 Ruote - A doppio battistrada con diametro 50 mm  
 Dimensioni - 48x47x92-112 cm

#### Рабочее кресло, высокая спинка, постоянный контакт, серая конструкция

Сиденье и спинка - Набивочный материал - пенополиуретан плотность 40.  
 Подъём - Все колонны с газовой пружиной соответствуют стандарту DIN 4550 и превышают 4-й уровень.  
 Механические - Постоянный контакт, сталь, покрытая полиуретаном. Регулировка по высоте и глубине сиденья. Спинка регулируемая маховиком.  
 Подлокотники - Пластиковые серые.  
 Основание - Из полипропилена и серого картера.  
 Колёса - С двойным протектором диаметром 50 мм.  
 Размеры - 48x47x92-112 см



### 17-PT405 come 17-PT425 ma con struttura e braccioli NERI

Как 17-PT425, но конструкция и подлокотники - ЧЁРНЫЕ

### 17-PT415 come 17-PT405 ma con schienale MEDIO

Как 17-PT405, но спинка - СРЕДНЯЯ

- Sistema di sedute omologato classe 11M Ministero dell'Interno (con tessuto Xtreme, e gomme ignifughe). Certificata EN1335 cat.B. n. 479/2002. CONFORME D.L. 626/94  
 - Система регулировки сиденья сертифицирована по классу 11М Министерством внутренних дел (ткань "Xtreme" и огнестойкая резина) Сертификация EN1335 cat. B. № 479/2002. СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ ПРОЕКТА ЗАКОНА 626/94

### 17-PT305 Sedia fissa in plastica senza braccioli struttura grigia

Struttura - Metallica verniciata con polveri epossidiche antigraffio in grigio alluminio, con gommini antiscivolo e antirumore  
 Sedile e Schienale - Anatomici realizzati in materiale plastico ignifughi in classe 1  
 Dimensioni - 53x44x81 cm

#### Сиденье неподвижное пластиковое без подлокотников, каркас серый

Каркас - Металлический, окраска эпоксидной порошковой краской, нецарапающаяся, из серого алюминия, со звукоизолирующими и противоскользящими резиновыми подкладками  
 Сиденье и спинка - Анатомические, изготовлены из огнестойкого пластикового материала класса 1  
 Размеры - 53x44x81 см



### 17-PT300 come 17-PT305 ma con struttura NERA

Как 17-PT305, но конструкция - ЧЁРНАЯ

### 17-PT301 come 17-PT300 ma con BRACCIOLI

Как 17-PT300, но с ПОДЛОКОТНИКАМИ

- Carter conforme alle norme UNI EN 1728 - CONFORME D.L. 626/94  
 - Carter соответствует стандарту UNI EN 1728 - СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДПИСАНИЯМ ПРОЕКТА ЗАКОНА 626/94

### Appendiabiti a muro 2-3-4 posti in bilaminato

Struttura - In bilaminato spessore 20 mm bordato in ABS. Dotato di appendiabiti in materiale plastico



### Вешалка настенная 2-3-4 места из биламината

Конструкция - Из биламината толщиной 20 мм с кромкой из АБС. С вешалкой из пластикового материала

	L	P	H
21-CL902	43,2	2	20
21-CL903	65,0	2	20
21-CL904	86,4	2	20





### 21-CL710 Appendiabito a colonna con portaombrelli in polipropilene


Struttura - In acciaio, con finitura grigio, alluminio o nero, 5+5 posti.  
 Base - In polipropilene. Finitura grigio, alluminio o nero  
 Braccia -  
 Portaombrelli -  
 Dimensioni - 44x178 H cm

#### Вешалка-стойка с подставкой для зонтов из полипропилена

Конструкция - Стальная, отделка серая, алюминиевая или чёрная, 5+5 мест

Основание - Из полипропилена. Отделка серая, алюминиевая или чёрная  
 крючки -  
 подставка для зонтов -

Размеры - 44x178 H см

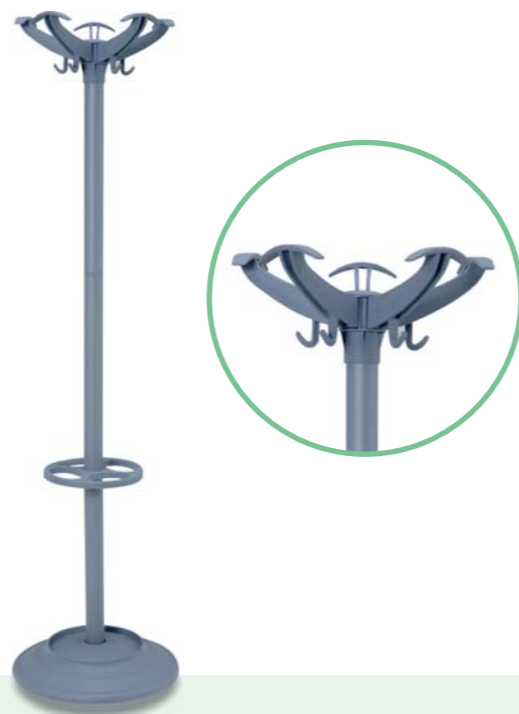

### 21-CL709 Appendiabito a colonna con portaombrelli

Struttura - In tubo d'acciaio verniciato montata su base in materiale plastico a 4 razze con vaschetta raccogliacqua integrata.  
 Portaombrelli - Portaombrelli posto a metà colonna in materiale plastico dotato di 5 posti con pomoli alle estremità in materiale plastico per un totale di 8 posti  
 Dimensioni - 61x174 H cm

#### Вешалка-стойка с подставкой для зонтов

Конструкция - Стальная крашенная трубка, вмонтированная в основание из пластикового материала с 4 спицами со встроенной ёмкостью для сбора воды

Подставка для зонтов - Подставка для зонтов, размещённая посередине колонны, из пластикового материала, на 5 мест, с круглыми ручками на концах, из пластикового материала, всего на 8 мест

Размеры - 61x174 H см

### 21-SM3 Paravento a tre ante su ruote

Struttura - In tubi di acciaio verniciati è dotata di 2 ante richiudibili ai lati ed è montata su basamento pesante in acciaio  
 Pannelli - Realizzati in tessuto Trevira CS poliestere 100% ignifugo ed è lavabile max. a 30°  
 Ruote - Piroettanti diametro 50 mm


#### Ширма трехсекционная на колёсах

Каркас - Из стальных окрашенных труб, оснащена 2 складывающимися створками по бокам, установлена на массивном стальном основании

Панели - Изготовлены из ткани "Trevira CS" 100% полиэстер, огнестойкой, стирка возможна при макс. температуре 30°

Колёса - Поворотные диаметром 50 мм

	L	H
21-SM3	150	180
21-FP704	150	170
21-FP707	150	170
21-FP714	150	176
21-FP717	150	176

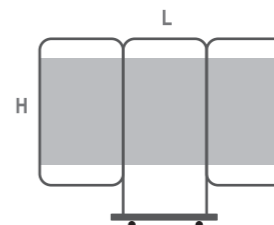

### 21-FP704 Paravento a tre ante struttura CROMATA

Struttura - Composta da 3 pannelli richiudibili su se stessi realizzati in tubi di acciaio sezione tonda cromati. Il tutto poggia su gambe con puntali in materiale plastico.  
 Pannelli - In tessuto Trevira CS poliestere 100% ignifugo ed è lavabile max. a 30°.

#### Ширма трехсекционная - ХРОМИРОВАННАЯ конструкция

Конструкция - Состоит из 3 складывающихся створок, изготовленных из стальных хромированных труб с круглым сечением. Всё изделие опирается на ножки с насадками из пластикового материала

Панели - Из ткани "Trevira CS" 100% полиэстер, огнестойкой, стирка возможна при макс. температуре 30°



### 17-FP374 Sgabello girevole con RUOTE

Struttura - In lega di alluminio inossidabile ad elevazione a vite  
 Base - Su 5 ruote diametro 50 mm  
 Altezza - Minima 54 max 68 cm

#### Табурет поворотный с КОЛЁСАМИ

Конструкция - Из алюминиевого нержавеющей сплава, с винтовым регулятором высоты

Основание - На 5 колёсах диаметром 50 мм

Высота - Минимальная 54 макс. 68 см



17-FP372 come 17-FP374 ma con PIEDINI  
 Как 17-FP374, но с ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ

### 17-FP379 Sgabello girevole sedile IMBOTTITO con RUOTE

Struttura - In lega di alluminio inossidabile ad elevazione a vite  
 Base - Su 5 ruote diametro 50mm  
 Sedile - Rotondo imbottito e rivestito in similpelle lavabile  
 Altezza - Minima 54 max 68 cm

#### Табурет поворотный, сиденье С ОБИВКОЙ, с КОЛЁСАМИ

Конструкция - Из алюминиевого нержавеющей сплава, с винтовым регулятором высоты

Основание - На 5 колёсах диаметром 50 мм

Сиденье - Круглое, с обивкой, с обшивкой из моющегося кожаного материала

Высота - Минимальная 54 макс. 68 см

17-FP376 come 17-FP379 ma con PIEDINI  
 Как 17-FP379, но с ОПОРНЫМИ НОЖКАМИ

### 21-FP714 Paravento a tre ante struttura CROMATA con RUOTE

Ширма трехсекционная – ХРОМИРОВАННЫЙ каркас с КОЛЁСАМИ

### 17-FP707 Paravento a tre ante struttura VERNICIATO

Ширма трехсекционная - ОКРАШЕННЫЙ каркас

### 17-FP717 Paravento a tre ante struttura VERNICIATO con RUOTE

Ширма трехсекционная - ОКРАШЕННЫЙ каркас с КОЛЁСАМИ





### 123-A-03 Negativo orizzontale da parete

Struttura - In acciaio verniciato con polveri epossidiche  
 Lampade - Nr. 3 lampade fluorescenti circolari da 32 Watt.  
 Costruito secondo le norme DIN 6856/1/2 per quanto riguarda la luminanza

#### Негатоскоп горизонтальный настенный

Корпус - Из стали, крашеной эпоксидной порошковой краской  
 Лампы - Кол-во: 3 круглые флуоресцентные лампочки 32 Вт.  
 Изготовлен согласно стандарту DIN 6856/1/2 на предмет яркости



	L	P	H
123-A-03	700	120	430
123-A-04	900	120	430
123-A-05	1200	120	430
123-A-06	1500	120	430



### 21-FP528 Bilancia pesapersona ad orologio

Struttura - Verniciata con polveri epossidiche colore bianco  
 Misurazione del peso - Sistema interno a molla con cremagliera  
 Pedana - In ferro rivestita in gomma atossica e antiscivolo  
 Portata - 150 Kg  
 Suddivisione - In 500 grammi  
 Dimensioni - 27,2 x 40 x 91 cm  
 Classe protezione - IIII conforme alle normative CEE 90/384

#### Весы с часами

Корпус - Окрашен эпоксидной порошковой краской белого цвета  
 Измерение веса - Внутренняя система на пружине с зубчатой рейкой  
 Платформа - Железная с обшивкой из нетоксичной и нескользкой резины  
 Предел измерения - 150 кг  
 Деление - по 500 грамм  
 Размеры - 27,2 x 40 x 91 см  
 Класс защиты - IIII, соответствует стандартам ЕЭС 90/384



### 21-FP537 Lampada alogena su stativo con ruote

Braccio - Lunghezza 105 cm  
 Struttura - Stativa a 5 razze realizzata in tubolare di acciaio verniciato colore bianco con alla base 5 ruote D=5 cm gemellari in nylon + zavorra antibaltamento  
 Lampada - Alogena dicroica a luce fredda da 50W, 12V, con riflettore interno compresa. Conforme NEMKO, EN 60601-1 E DIRETTIVA 93/42-EEC

#### Галогенная лампа на штативе с колёсами

Стойка - Длина 105 см  
 Конструкция - Штатив из 5 спиц, изготовлен из крашеной трубчатой стали белого цвета, 5 нейлоновых спаренных колёс у основания диам. 5 см + балласт для защиты от опрокидывания  
 Лампа - Галогенная холодного света на 50 Вт, 12 В, с внутренним дихроичным отражателем, включена. Соответствует стандарту NEMKO, EN 60601-1 И ДИРЕКТИВЕ 93/42-ЕЭС



### 21-FP529 Bilancia a ROMANO con altimetro

Struttura - Interamente metallica verniciata con polveri epossidiche colore bianco  
 Misurazione del peso - Asta graduata cromata e di facile lettura  
 Pedana - Con tappeto in gomma antiscivolo  
 Portata - 150 Kg  
 Suddivisione - In 100 g  
 Dimensioni - 33x50x144 H  
 Classe protezione - IIII conforme alle normative CEE 90/384

#### Безмен с высотомером

Корпус - Полностью металлический, окрашенный эпоксидной порошковой краской белого цвета  
 Измерение веса - Хромированная градуированная стойка простого пользования  
 Платформа - С нескользким резиновым ковриком  
 Предел измерения - 150 кг  
 Деление - по 100 г  
 Размеры - 33x50x144 H  
 Класс защиты - IIII, соответствует стандартам ЕЭС 90/384

### 21-FP549

#### Altimetro per bilancia

Scala graduata - da 0,65 a 2 mt.  
 Divisione - 5 mm  
 Dimensioni - 10 x 10 x 150 H

#### Высотомер для весов

Градуированная от 0,65 до 2 м шкала -  
 Деление - 5 мм  
 Размеры - 10 x 10 x 150 H





### 21-FP534 Piantana portaflebo a 4 ganci

Base - In resina poliuretana a 5 razze con ruote diam. 50 cm gemellari. Colonna portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Asta telescopica in acciaio cromato a sezione quadra con 4 ganci. Regolazione in altezza con bloccaggio ad eccentrico in ABS.

Dimensioni - Base Diametro 50 cm Altezza Da 165 a 210 cm

#### Стойка для капельниц с 4 крючками

Конструкция - Из полиуретана с 5 ножками, с двойными колёсами диам. 50 см. Несущая колонна из стали, окрашенной эпоксидной порошковой краской. Стойка телескопическая, стальная, хромированная, квадратного сечения, с 4 крючками. Регулировка по высоте с эксцентриковым блокиратором из ABS.

Размеры - Основание Диаметр 50 см Высота от 165 до 210 см

### 21-FP530 come 21-FP534 ma con 2 ganci

Как 21-FP534, но с 2 крючками



### 21-FP536 Piantana portaflebo a 4 ganci su ruote per pompe infusione

Struttura - Base in resina poliuretana a 5 razze con ruote diam. mm 50 gemellari. Colonna portante in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Asta telescopica in acciaio cromato a sezione quadra con 4 ganci con aste per ancoraggio pompe infusione.

Dimensioni - Base Diametro 50 cm Altezza Da 165 a 210 cm

#### Стойка для капельниц с 4 крючками, на колёсах, для насосов для вливаний

Конструкция - Из полиуретана с 5 ножками, с двойными колёсами диам. 50 мм. Несущая колонна из стали, окрашенной эпоксидной порошковой краской. Стойка телескопическая, стальная, хромированная, квадратного сечения, с 4 крючками, с крючками для установки насосов для вливаний.

Размеры - Основание Диаметр 50 см Высота от 165 до 210 см

### 21-FP531 Scaletta 1-2-3 gradini

Struttura - In tubo di acciaio cromato. Pianetto con strato superiore in gomma millerighe antiscivolo. Alla base n°4 puntali in materiale plastico.

#### Лестница 1-2-3 ступеньки

Корпус - Из хромированной трубчатой стали. Опорная поверхность с верхним слоем из нескользкой ребристой резины. У основания 4 ножки из пластикового материала.



Dimensioni - 40x42x30 h  
Размеры -



### 21-FP532

Dimensioni - 40x52x46 h  
Размеры -



### 21-FP533

Dimensioni - 40x71x45 h  
Размеры -

### 21-FP521 Porta-rifiuti INOX

Corpo - In acciaio inox AISI 304. Secchio interno in plastica nera con maniglia in metallo

Capacità - 14 Litri

Dimensioni - Diametro 25x38 H cm

#### Ёмкость для мусора из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Корпус - Из нержавеющей стали AISI 304. Ёмкость внутри из чёрного пластика и металлической ручкой

Объём - 14 литров

Размеры - Диаметр 25x38 H см







# Armadi MEDICINALI


## Медицинские шкафы

### 23-PA7200 Armadio Medicinali due ante laminato con TESORETTO

Struttura - In lamiera di acciaio elettrozincata spessore 8/10 verniciata con polveri epossidiche ed essiccata in tunnel termico a 200° resistente al lavaggio e disinfezione. Ante in truciolare sp. mm 18 rivestito su entrambe le facce con laminato plastico a spessore da mm 0,9 con bordo perimetrale in ABS arrotondato sp. 3 mm montate con cerniere apertura a 230°. Chiusura di sicurezza a triplice azione, sopra sotto e centrale. Maniglie in gomma morbida antitrauma. Nello scomparto interno vengono inseriti 2 contenitori bifacciali ruotabili di 150° in polistirolo termoformato con complessivi 40 scomparti dotati di ringhierino in plexiglass estraibile atti a contenere farmaci. All'interno dell'armadio viene collocato un tesoretto con serratura per la custodia di stupefacenti. Base con gambe in tubolare diametro mm 60 con puntali registrabili

#### Шкаф для медикаментов двухстворчатый из ламината с СЕЙФОМ

Корпус - Из электроцинкованной листовой стали толщиной 8/10, окрашенной эпоксидной порошковой краской и высушенная в термотуннеле при температуре 200°, стойкая к промывке и дезинфекции. Створки из ДСП толщ. 18 мм с обшивкой с обеих сторон из пластикового ламината толщиной 0,9 мм с закругленной периметральной кромкой из ABS толщ. 3 мм, установленные на шарнирных петлях с углом раскрытия 230°. Замок безопасности с фиксацией в 3х точках: сверху, снизу и по центру. Ручки из мягкой безопасной резины. Внутри установлены 2 двухсторонние створки, вращающиеся на 150°, из штампованного полистирола, с 40 отделениями для медикаментов со съёмными бортиками из плексигласа. Внутри шкафа помещается специальный сейф с замком для хранения наркотических средств. Ножи выполнены из стальной окрашенной трубки диам. 60 мм. с пластиковыми наконечниками, регулируемые в высоту.

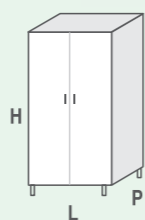

	L	P	H
23-PA7200	100	62	200
23-PA7205	100	62	200
13-FP801	100	60	197
13-FP802	100	60	197

23-PA7205 come 23-PA7200 senza TESORETTO  
Как 23-PA7200 без СЕЙФА

13-FP801 Armadio medicinali senza tesoretto  
структура completamente in nobilitato  
Шкаф для медикаментов без сейфа,  
конструкция полностью из дсп

13-FP802 come 13-FP 801 con TESORETTO  
Как 13-FP 801 с СЕЙФОМ


### 13-FP803 Tesoretto per stupefacenti

Struttura - In lamiera di acciaio FE 360 verniciata con polveri epossidiche ed essiccata in tunnel termico a 200 gradi. Dotato di serratura a cariglione con blocco sia sul lato dx che sx.

#### Сейф для наркотических средств

Конструкция - Из листовой стали FE 360, окрашенной эпоксидной порошковой краской и высушенной в термотуннеле при температуре в 200 градусов. Оснащена цилиндрическим замком с блокиратором как справа, так и слева.

	L	P	H
13-FP803	47	23	35,5

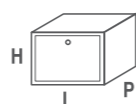

# Armadi VETRINA METALLICI

## Металлические витрины

### 13-FP248 Vetrina porta strumenti ante in vetro superiori e ante e 3 cassetti inferiori

Витрина для инструментов со стеклянными дверцами сверху и одной дверцей и 3 ящичками внизу

Struttura - In lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche essiccata in tunnel termico a 200°. All'interno n°4 ripiani in vetro temperato spessore 5 mm regolabili in altezza tramite cremagliere.


Anta - A battente in vetro temperato incorniciato su telaio esterno in profilo d'alluminio anodizzato e sigillato tramite guarnizioni antipolvere. Serratura a cariglione con blocco nella parte superiore ed inferiore. Maniglie di presa in tondino di acciaio verniciato.

Base - Quattro gambe in tubolare d'acciaio verniciate e rivestite in tubolare d'alluminio anodizzato con piedi regolabili in plastica.

Корпус - Из стального листа, окрашенного эпоксидной порошковой краской и высушенного в термотуннеле при температуре в 200°. Внутри 4 полки из закалённого стекла толщиной 5 мм, регулируемые по высоте при помощи зубчатых реек.

Дверца - Из закалённого стекла в рамке из профиля анодированного алюминия с противольной прокладкой. Цилиндрический замок с блокиратором в верхней и нижней части. Ручки из окрашенного стального прутка.

Основание - Четыре ножки из трубчатой стали, окрашенные и обшитые трубкой из анодированного алюминия, с регулируемыми пластиковыми опорными ножками.

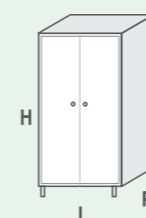

	L	P	H
13-FP243	60	43	180
13-FP244	80	43	180
13-FP246	80	43	180
13-FP248	80	47	180



13-FP243  
Vetrina porta strumenti ad 1 anta in vetro  
Витрина для инструментов с 1 стеклянной дверцей



13-FP244  
Vetrina porta strumenti a 2 ante in vetro  
Витрина для инструментов с 2 стеклянными дверцами



13-FP246  
Vetrina porta strumenti ante in vetro superiori e ante cieche inferiori  
Витрина для инструментов со стеклянными дверцами сверху и глухими дверцами внизу




# Armadi VETRINA ante in bilaminato

## Витрины с дверками из биламината

- Struttura** - In lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche essiccata in tunnel termico a 200°.
- Anta** - Ciecche realizzate in bilaminato con bordo perimetrale in ABS arrotondato e in vetro temperato incorniciato su telaio esterno in profilo d'alluminio anodizzato e sigillato tramite guarnizioni. Maniglie in gomma morbida antitrauma.
- Interno** - Divisore verticale con possibilità di alloggiare ripiani in lamiera d'acciaio verniciata o fianchi attrezzati in ABS attrezzabili con vaschette o cestelli opzionali.
- Base** - Con gambe in tubolare diametro 6 cm con puntali regolabili a richiesta zoccolo in acciaio inox AISI 304 asportabile
- Corpus** - Из стального листа, окрашенного эпоксидной порошковой краской и высушенного в термотуннеле при температуре 200°.
- Дверца** - Глухая из биламината с закрученной периметральной кромкой из АБС и закаленным стеклом в рамке на наружной раме из профиля анодированного алюминия с противопыльной прокладкой. Ручки из мягкой безопасной резины.
- Внутренняя часть** - Вертикальная перегородка с возможностью размещения окрашенных полок из стального листа или боковин из АБС для установки лотков или других дополнительных ёмкостей.
- Основание** - С ногами из трубчатой стали диаметром 6 см с регулируемыми ножками, по заказу со съёмной колодкой из нержавеющей стали AISI 304




**23-PA246**  
Armadio ante in vetro superiori e ante cieche inferiori  
Шкаф со стеклянными дверцами вверху и глухими внизу

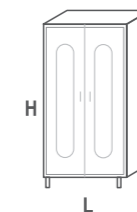

	L	P	H
23-PA244	92	67	211
23-PA246	92	47	211
23-PA248	92	47	211



**23-PA244**  
Armadio ante in vetro con fianchi in ABS attrezzabili  
Шкаф со стеклянными дверцами и боковинами из АБС

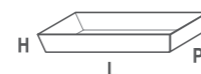

**Vaschette in ABS**  
Лотки из АБС

	L	P	H
23-PA405	60	40	5
23-PA410	60	40	10
23-PA420	60	40	20



**Kit divisorio per vaschetta in ABS**  
Комплект перегородок для лотка из АБС


	L	H
23-PA620	60	20
23-PA625	40	20
23-PA610	60	10
23-PA615	40	10

**Cestello in ABS**  
Ёмкость из АБС

	L	P	H
23-PA510	60	40	10
23-PA520	60	40	20



**Targhette**  
Таблички

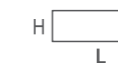

	L	H
23-PA700	6	4
23-PA705	4	6

**23-PA248**  
Armadio ante in vetro superiori e ante e tre cassetti inferiori  
Шкаф со стеклянными дверцами вверху и одной дверцей и тремя ящиками внизу







# Armadi ARCHIVIAZIONE

## Архивные шкафы

Struttura - In lamiera d'acciaio verniciata.

Anta -  
-a battenti in lamiera di acciaio verniciata con chiusura in basso in alto ed al centro con serratura del tipo Yale; All'interno 4 ripiani regolabili su cremagliere predisposti per il contenimento di cartelle sospese.  
-scorrevoli in lamiera di acciaio verniciata con maniglie ad incasso in materiale plastico e chiusura con serratura del tipo Yale;  
-scorrevoli con vetri temperati da mm 4 ed intelaiati sui 4 lati con cornici in lamiera, con maniglie ad incasso in materiale plastico e chiusura con serratura del tipo Yale. Ogni vano e corredato di 4+4 ripiani regolabili su cremagliere e predisposti per il contenimento di cartelle sospese.

Corpus - Из окрашенного стального листа.

Дверца -  
- распашная, из стального листа, окрашенная, запирается в 3х точках: внизу, вверху и по центру замком типа Yale; внутри 4 регулируемых по высоте полки для хранения файловых папок.  
-раздвижная, из стального листа, окрашенная, со встроенными ручками из пластикового материала и замком типа Yale;  
-раздвижная, с закалённым стеклом в 4 мм, встроена в раму из стального профиля, со встроенными ручками из пластикового материала и замком типа Yale. Каждое отделение оснащено 4+4 регулируемых по высоте полками для хранения файловых папок.



13-CL331  
13-CL332  
Armadio ante BATTENTI  
Шкаф с РАСПАШНЫМИ дверцами




13-CL333  
13-CL334  
Sopralzo ANTE BATTENTI  
Шкаф-антресоль с РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ




13-CL301  
13-CL302  
13-CL303  
Sopralzo ANTE SCORREVOLI  
Шкаф-антресоль с РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРЦАМИ



13-CL361  
13-CL362  
13-CL363  
Sopralzo ANTE SCORREVOLI in VETRO  
Шкаф-антресоль с РАЗДВИЖНЫМИ СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЦАМИ

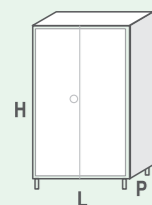

	L	P	H
13-CL331	100	45	200
13-CL332	120	45	200
13-CL311	120	45	200
13-CL312	150	45	200
13-CL313	180	45	200
13-CL321	120	45	200
13-CL322	120	45	200
13-CL323	180	45	200

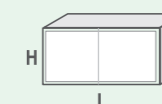

	L	P	H
13-CL333	100	45	85
13-CL334	120	45	85
13-CL301	120	45	85
13-CL302	150	45	85
13-CL303	180	45	85
13-CL361	120	45	85
13-CL362	150	45	85
13-CL363	180	45	85



13-CL311  
13-CL312  
13-CL313  
Armadio ante SCORREVOLI  
Шкаф с РАЗДВИЖНЫМИ дверцами



13-CL321  
13-CL322  
13-CL323  
Armadio ante SCORREVOLI in vetro  
Шкаф с РАЗДВИЖНЫМИ стеклянными дверцами

### Classificatore a 2-3-4 cassetti


Struttura - Struttura realizzata interamente in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche ed essiccata in tunnel termico a 200°

Cassetti - In lamiera d'acciaio scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale corredati di asole per l'eventuale posizionamento di separatori per schede. Maniglia di apertura direttamente inglobata nella toppa stessa. Ogni cassetto è dotato di due aste per cartelle sospese predisposto per le versioni da 33 e da 39 cm. Serratura tipo yale con combinazione 1/1000 con bloccaggio simultaneo di tutti i cassetti.

### Картотечный шкаф с 2-3-4 ящиками

Corpus - Корпус полностью изготовлен из стального листа, окрашенного эпоксидной порошковой краской и высушенного в термотуннеле при температуре в 200°.

Ящики - Из стального листа, выдвигаемые на телескопических направляющих с полным выдвиганием, оснащены петлями для размещения разделителей для карточек. Ручка встроена прямо в замок. Каждый ящик оснащён двумя рейками для подвешенных папок для моделей от 33 до 30 см. Замок типа Yale с комбинацией 1/1000 и синхронной блокировкой всех ящиков.

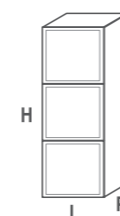

	L	P	H
21-CL452	68	50	76
21-CL453	68	50	108
21-CL454	68	50	140



21-CL454



21-CL453



21-CL452