



ED. 005_I-RJ_16.11.15 rev.01



Arredi per ospedali, cliniche e comunità

ARREDI IN ACCIAIO INOX

Мебель из нержавеющей стали

design and made in Italy

Vernipoll srl opera con successo dal 1980 nel mercato degli arredi per ospedali, cliniche e comunità in Italia e all'estero con una propria produzione e una rete commerciale/distributiva.

L'affidabilità, la robustezza e la sicurezza dei prodotti sono garantite attraverso la certificazione ISO 9001 e ISO 13485.

Vernipoll srl успешно работает на рынке медицинской мебели с 1980 года. Компания располагает собственной торговой и дистрибьюторской сетью в Италии и в зарубежных странах.


Надежность, прочность и безопасность нашей продукции гарантированы сертификацией ISO 9001 и ISO 13485.



06031 Bevagna (PG) - ITALY
Via dell'Artigianato, 3
T. +39 0742 360549
F. + 39 0742 360043
vernipoll@vernipoll.com
www.vernipoll.com



Ministero della Salute
Iscrizione Reg. repertorio dispositivi medici S.S.N.

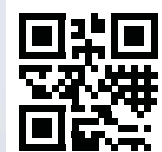

L'azienda si riserva di apportare, senza preavviso, modifiche, migliorie e tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune.
Компания оставляет за собой право вносить изменения или улучшения во всю продукцию по своему усмотрению без предварительного уведомления.

ART DIRECTION: AF-DESIGN - PHOTO: Afs color





La linea di arredi inox Vernipoll è ideale per quegli ambienti che richiedono un'elevata sterilità e quindi frequente disinfezione.

I nostri prodotti sono realizzati completamente in acciaio inox Aisi 304 con finitura scotch-brite, con solide strutture studiate per garantire oltre il massimo della leggerezza, un'elevata robustezza e durata nel tempo.

L'assemblaggio avviene tramite il processo di saldatura che permette di ottenere giunzioni perfettamente stagne tali da rendere i prodotti facilmente e velocemente sanificabili.

Tutti i prodotti sono certificati, garantiscono la massima sicurezza e sono noti per la realizzazione di alto standard qualitativo.

Гамма продукции Vernipoll идеально подходит для помещений, которые требуют высокой степени стерильности и, соответственно, частого применения дезинфицирующих средств.

Вся наша продукция производится из нержавеющей стали Aisi 304 с отделкой Scotch-Brite. Изделия проектируются и исполняются таким образом, чтобы гарантировать оптимальное сочетание легкости конструкции, надежности и длительности эксплуатации.

Качественная сварка позволяет получить герметичные соединения элементов изделий, что значительно облегчает уход и санитарную обработку. Вся продукция сертифицирована, максимально надёжна и отличается высоким классом исполнения.

Carrelli di servizio Тележка вспомогательная



16-FP446 (Dim. 60x45x156h)
- Carrello inox portafarmaci
- Тележка для медикаментов из нержавеющей стали



16-SO105 (Dim. 55x65x160h)
- Carrello inox porta monitor
- Тележка для аппаратуры из нержавеющей стали



16-FP447 Variante 1 (Dim. 83x53x135h)
- Carrello inox anestesia
- Тележка анестезиолога из нержавеющей стали



16-FP443 (Dim. 60x40x122h)
- Carrello inox per anestesia
- Тележка анестезиолога из нержавеющей стали



16-FP444 (Dim. 96x56x82h)
- Carrello inox porta farmaci
- Тележка для медикаментов из нержавеющей стали



16-FP411 Variante 1 (Dim. 68x43x80/95h)
- Carrello inox due ripiani
- Тележка из нержавеющей стали с 2 полками



16-FP411 Variante 2 (Dim. 68x43x80/95h)
- Carrello inox tre ripiani
- Тележка из нержавеющей стали с 3 полками



16-FP470 Variante 1 (Dim. 90x55x82/95h)
- Carrello inox due ripiani
- Тележка из нержавеющей стали с 2 полками



16-FP471 Variante 1 (Dim. 90x55x82/95h)
- Carrello medicazione inox
- Тележка процедурная из нержавеющей стали



Carrelli di servizio Тележки специализированные



16-FP470 Вариант 2 (Dim. 100x55x82h)
- Carrello inox porta strumenti
- Тележка для инструментов из нержавеющей стали
16-FP470 Вариант 3 (Dim. 55x43x82h)
- Carrello inox porta strumenti
- Тележка для инструментов из нержавеющей стали



16-FP471 Вариант 2 (Dim. 55x45x82h)
- Carrello inox con un cassetto
- Тележка с одним ящиком



16-FP471 Вариант 3 (Dim. 55x45x82h)
- Carrello inox con tre cassetti
- Тележка с тремя ящиками



Tavoli servitori MAYO Тележки для инструментов ГУСЬ



16-FP442 Вариант 1 (Dim. 75x48,5x88/122h)
- Tavolo servitore ad elevazione oleodinamica
- Столик инструментальный с гидравлическим изменением высоты



16-FP441 (Dim. 71,5x48,5x94/116h)
- Tavolo servitore ad elevazione manuale
- Столик инструментальный с механическим изменением высоты



16-FP442 Вариант 2 (Dim. 71,5x48,5x95/130h)
- Tavolo servitore ad elevazione oleodinamica con basamento 5 razze
- Столик инструментальный с гидравлическим изменением высоты на 5 ножках



16-FP442 Вариант 3 (Dim. 75x48,5x95/125h)
- Tavolo servitore ad elevazione oleodinamica con basamento 4 razze
- Столик инструментальный с гидравлическим изменением высоты на 4 ножках



Carrelli per sale operatorie Столы и тележки для операционных



- Tavolo portaferrini inox con alzatina
- Стол инструментальный с бортиком
- 16-FP431 (Dim. 150x65x90/120h)
- 16-FP432 (Dim. 135x65x90/120h)
- 16-FP433 (Dim. 120x65x90/120h)
- 16-FP434 (Dim. 80x65x90/120h)



- Tavolo portaferrini inox con 2 ripiani
- Стол инструментальный с 2 полками
- 16-FP435 Variante 1 (Dim. 150x65x90h)
- 16-FP435 Variante 2 (Dim. 135x65x90h)
- 16-FP437 Variante 1 (Dim. 120x65x90h)
- 16-FP437 Variante 2 (Dim. 80x65x90h)

Gradini / Ступеньки



- Gradino singolo per sala operatoria
- Ступенька одинарная для операционной
- 18-SO105 (Dim. 60x35x13h)
- 18-SO110 (Dim. 60x35x22h)
- 18-SO115 (Dim. 60x35x30h)
- Gradino doppio per sala operatoria
- Ступенька двойная для операционной
- 18-SO120 (Dim. 60x65x22/44h)



- 16-SO305 (Dim. 60x59x145h)
- Carrello bifacciale
- CONFIGURAZIONE IN FOTO: con cestelli optional
- Тележка двусторонняя в комплектации как на фото с дополнительными корзинами (опция)



- 16-SO400 (cm. 70h)
- Coppia listelli inox a 2 ganci
- Пара настенных держателей с 2 крючками
- 16-SO405 (cm. 105h)
- Coppia listelli inox a 3 ganci
- Пара настенных держателей с 3 крючками
- 16-SO410 (cm. 140h)
- Coppia listelli inox a 4 ganci
- Пара настенных держателей с 4 крючками
- 16-SO415 (cm. 175h)
- Coppia listelli inox a 5 ganci
- Пара настенных держателей с 5



- 16-SO385 (Dim. 9x14x7h)
- Contenitore modello A
- Контейнер мод. А
- 16-SO390 (Dim. 13x22x12h)
- Contenitore modello B
- Контейнер мод. В
- 16-SO395 (Dim. 19x31x16h)
- Contenitore modello C
- Контейнер мод. С

Accessori / Аксессуары



- 16-SO310 (Dim. 60x30x30h)
- Cestello in tondino
- Проволочная корзина



- 16-SO311 (Dim. 60x30x30h)
- Cestello in tondino con feritoia
- Проволочная корзина с выемкой



- 16-SO315 (Dim. 60x30x15h)
- Cestello in tondino
- Проволочная корзина



- 16-SO316 (Dim. 60x30x15h)
- Cestello in tondino con invito
- Проволочная корзина с низким бортиком



- 16-SO317 (Dim. 29,5x13)
- Divisorio per cestello 16-SO316
- Разделитель для корзин 16-SO316



- 16-SO320 (Dim. 60x36x25h)
- Piano porta oggetti
- Столик-подставка



- 16-SO325 (Dim. 60x35x25h)
- Piano d'appoggio con supporto
- Полочка с опорой



- 16-SO330 (Dim. 60x13x30h)
- Porta carta
- Держатель для бумаги



- 16-SO335 (Dim. 60x34x23h)
- Piano scrittoio
- Столик



- 16-SO340 (Dim. 60x36x18h)
- Porta rotolo sacchetti con taglierina
- Держатель для пакетов с резакром



- 16-SO345 (Dim. 60x11x19h)
- Dispensatore per materiale vario 5 posti
- Диспенсер для различных материалов на 5 мест
- 16-SO350 (Dim. 60x18x20h)
- Dispensatore per materiale vario 4 posti
- Диспенсер для различных материалов на 4 мест



- 16-SO355 (Dim. 60x18x38h)
- Dispensatore per materiale vario 4+5 posti
- Диспенсер для различных материалов на 4+5 мест



- 16-SO360 (Dim. 60x18x29h)
- Dispensatore per materiale di sutura
- Диспенсер для шовных материалов



- 16-SO365 (Dim. 60x35x28h)
- Porta siringhe ed accessori
- Полочка для шприцев и аксессуаров



- 16-SO370 (Dim. 63,5x7x14h)
- Supporto per contenitori in plastica contenitore mod. A max 5 pezzi
- Держатель для контейнеров типа А на 5 контейнеров
- 16-SO375 (Dim. 63,5x7x20h)
- Supporto per contenitori in plastica contenitore mod. B max 4 pezzi
- Держатель для контейнеров типа В на 4 контейнеров
- 16-SO380 (Dim. 63,5x7x26h)
- Supporto per contenitori in plastica contenitore mod. C max 3 pezzi
- Держатель для контейнеров типа С на 3 контейнера

Porta catini / Подставки для тазов



- 16-FP421
- Porta catino singolo con ruote completo di catino
- Подставка для таза на колесах с тазом



- 16-FP425
- Porta bacinella su ruote completo di bacinella
- Подставка с тазом для гипсования



- 16-FP423
- Porta catino doppio con ruote completo di catino
- Подставка для тазов двойная с тазами



Carrelli porta biancheria Тележки для белья



16-FP601 Вариант 1 (Dim. 105x64x106h)
- Carrello inox raccolta/distribuzione biancheria sporca/pulita
- Тележка из нержавеющей стали для чистого и грязного белья



16-FP602 Вариант 1 (Dim. 107x64x116h)
- Carrello inox raccolta/distribuzione biancheria sporca/pulita
- Тележка из нержавеющей стали для чистого и грязного белья

Carrelli porta sacco senza coperchio Тележки для белья без крышки



16-FP464 Вариант 2 (Dim. 66x47x96h)
- Carrello inox porta sacco 2 posti
- Тележка из нержавеющей стали на 2 мешка



16-FP464 Вариант 1 (Dim. 40x47x96h)
- Carrello inox porta sacco 1 posto
- Тележка из нержавеющей стали на 1 мешок



16-FP464 Вариант 3 (Dim. 95x47x96h)
- Carrello inox porta sacco 3 posti
- Тележка из нержавеющей стали на 3 мешка

Accessori Аксессуары



16-FP479
- Coperchio in abs completo di cerniere inox forma quadrata
- Крышка из абс с петлями из нержавеющей стали



16-FP481
- Sacco bianco con righe colorate (blu, rosso, verde, giallo, marrone)
- Белый мешок с цветными полосками (синий, красный, зеленый, желтый, коричневый)

Carrelli porta sacchi Тележки для грязного белья



16-FP602 Вариант 2 (Dim. 101x70x130h)
- Carrello inox trasporto biancheria pulita
- Тележка из нержавеющей стали для чистого белья

Carrelli porta zoccoli Тележка для обуви



16-SO100 (Dim. 96x61x165h)
- Carrello porta zoccoli
- Тележка для обуви

Carrelli porta padelle Тележки для суден



16-FP272 (Dim. 120x40x90h)
- Carrello porta padelle 12 posti
- Тележка для суден на 12 мест

Carrelli porta sacco con coperchio Тележки для мешков с крышкой



16-FP465 Вариант 1 (Dim. 40x47x97h)
- Carrello inox porta sacco 1 posto con coperchio a pedale
- Тележка из нержавеющей стали на 1 мешок с крышкой и педалью



16-FP465 Вариант 2 (Dim. 66x47x97h)
- Carrello inox porta sacco 2 posti con coperchio a pedale
- Тележка из нержавеющей стали на 2 мешка с крышкой и педалью



16-FP465 Вариант 3 (Dim. 95x47x97h)
- Carrello inox porta sacco 3 posti con coperchio a pedale
- Тележка из нержавеющей стали на 3 мешка с крышкой и педалью



Carrelli per sale operatorie Тележки для операционных

La linea dei carrelli, realizzata con una struttura completamente in acciaio inox AISI 304 e con ante e cassetti in tecnopolimero, è caratterizzata da un'elevata robustezza e garantisce una funzionalità ottimale.

Sono dotati di maniglione laterale di spinta in tubolare di acciaio inox AISI 304 e ruote antistatiche (Ø 125 mm) di cui due con freno. Alcuni possono essere personalizzati con molteplici accessori, per soddisfare ogni esigenza all'interno delle sale operatorie.

Гамма тележек с корпусом из нержавеющей стали AISI 304 и дверцами или ящиками из технополимеров отличается большой устойчивостью, износостойкостью и функциональностью.

Тележки имеют боковую ручку из той же стали и антистатические колеса диам. 125 мм, два из которых с тормозом.

Для отдельных моделей предусмотрена полная комплектация всеми аксессуарами, необходимыми в операционной.



16-FT940 Вариант 3
(Dim. 90x60x135h)
- Carrello inox con tesoretto interno, 6 cassetti e due ante in tecnopolimero.
- Тележка из нержавеющей стали с 14 ящиками

16-FT940 Вариант 4
(Dim. 120x60x135h)



16-FT940 Вариант 2
(Dim. 90x60x135h)
- Carrello inox con tesoretto interno, 6 cassetti e due ante in tecnopolimero.
- Тележка из нержавеющей стали с сейфом, 6 ящиками и 2 дверцами



Armadi inox Шкафы из нержавеющей стали

La struttura degli armadi può essere realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304 finitura spazzolata Scotch Brite, o in lamiera di acciaio elettrozincata verniciata con polveri epossiche.

Корпус шкафов может быть выполнен из нержавеющей стали марки Aisi 304 с матовой отделкой Scotch Brite, или из оцинкованной стали, окрашенной эпоксидным порошком.



13-FP271 Вариант 2
(Dim. 100x52x200h)
- Armadio stoccaggio materiali con ante battenti con 4 ripiani regolabili
- Шкаф для хранения различных материалов с распашными дверцами и 4 регулируемые полками

13-FP271 Вариант 1
(Dim. 100x45x190h)
- Armadio portapadelle in acciaio inox ante battenti con 3 ripiani
- Шкаф для суден из нержавеющей стали с 3 полками



13-FP271 Вариант 3
(Dim. 90x52x200h)
- Armadio con due cassetti, due ante vetro e due ante cieche
- Шкаф с 2 ящиками, 2 стеклянными и 2 глухими дверцами



13-FP271 Вариант 4
(Dim. 100x52x200h)
- Armadio stoccaggio materiali con ante battenti cieche e 10 cestelli in acciaio inox
- Шкаф для хранения материалов с глухими дверцами и 10 корзинами из нержавеющей стали

13-FP271 Вариант 5
(Dim. 100x52x200h)
- Armadio stoccaggio materiali con ante battenti in vetro e 10 cestelli in acciaio inox
- Шкаф для хранения материалов со стеклянными дверцами и 10 корзинами из нержавеющей стали



13-FP801 Вариант 2
(Dim. 100x62x200h)
- Armadio medicinali con tesoretto
- Шкаф для медикаментов с сейфом



23-PA1740 Вариант 1
(Dim. 60x62x200h)


- Armadio stoccaggio per 4 endoscopi con anta battente in vetro
- Шкаф для хранения 4 эндоскопов со стеклянной дверцей



23-PA1740 Вариант 2
(Dim. 100x62x200h)
- Armadio stoccaggio per 8 endoscopi con anta battente in vetro
- Шкаф для хранения 8 эндоскопов со стеклянной дверцей



Aste flebo Инфузионные стойки

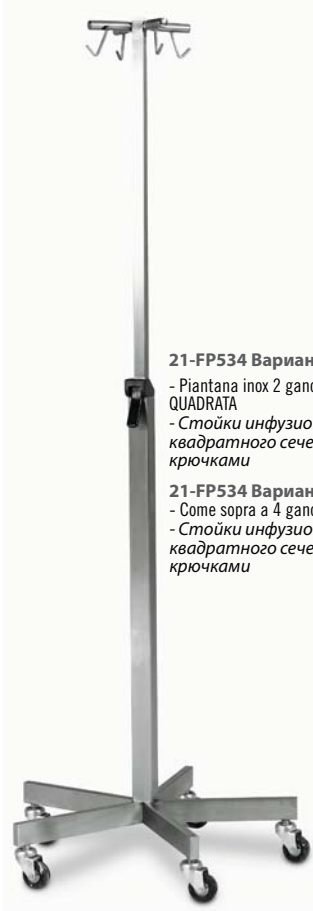

21-FP534 Вариант 1
- Piantana inox 2 ganci a sezione QUADRATA
- Стойки инфузионная квадратного сечения с 2 крючками
21-FP534 Вариант 2
- Come sopra a 4 ganci
- Стойки инфузионная квадратного сечения с 4 крючками



21-FP534 Вариант 3
- Piantana inox 4 ganci predisposta per ancoraggio pompe infusione
- Стойка инфузионная с 4 крючками с возможностью установки инфузионного насоса



21-FP534 Вариант 4
- Piantana inox 4 ganci con pianetto circolare porta oggetti
- Стойка инфузионная с 4 крючками с круглой полочкой



21-FP534 Вариант 5
- Piantana inox 4 ganci regolabile in altezza con bloccaggio a volantino
- Стойка инфузионная с 4 крючками телескопическая, механика



21-FP534 Вариант 6
- Piantana inox 4 ganci oleodinamica
- Стойка инфузионная с 4 крючками телескопическая, гидравлика

Scaffalature / Стеллажи



Realizzate completamente in acciaio inox AISI 304, l'assemblaggio dei componenti viene ad incastro in modo semplice funzionale ed estremamente veloce e garantisce la completa rigidità della struttura.

La modularità nella profondità, i sistemi di collegamento ad angolo e le varianti di larghezza dei piani prodotte consentono combinazioni dimensionali adatte qualsiasi spazio disponibile.

Possono essere realizzate in varie misure e lineari o angolari in base alle specifiche richieste del cliente.

Стеллажи производятся полностью из нержавеющей стали Aisi 304. Сборка стеллажей очень проста, функциональна и быстра, поскольку элементы вставляются один в другой, что гарантирует надежную устойчивость конструкции. Большое разнообразие глубины и ширины полок, систем соединения, высоты позволяет использовать различные комбинации размеров в зависимости от имеющегося пространства. По запросу клиента выполняются различные линейные или угловые композиции.

Lavelli per chirurghi Мойки для хирургов

Costruiti completamente in acciaio inox AISI 304 18/10 finitura Scotch Brite. Vasca unica sagomata antispruzzo con alzatine su tre lati, trattata con antirombo adesivo e dotata di piletta di scarico corredata di griglia stampata. Pannello superiore ed inferiore ispezionabile. Completi di kit per fissaggio a muro.

Tipologia

- 1-2-3 posti
- Erogazione acqua azionabile a pedale, a gomito o a fotocellula con miscelatore termostatico con pulsante - di sicurezza (da premere per superare i 38°)

Мойки производятся из нержавеющей стали марки Aisi 304 с матовой отделкой Scotch Brite. Емкость мойки цельнотянутая, что обеспечивает ее высокую гигиеничность, а внутренняя стенка имеет форму, препятствующую попаданию брызг на руки хирурга. Сливное отверстие защищено круглой съёмной решеткой из нержавеющей стали. Съёмные передние панели мойки обеспечивают легкий доступ к сантехническим коммуникациям для монтажа и технического обслуживания.


В комплекте поставляется фурнитура для крепления изделия к стене.

Варианты исполнения

- 1-местные
- 2х-местные
- 3х-местные
- Подача воды возможна при помощи ножной педали, локтевого смесителя или фотоэлементов с предохранителем (регулирующим температуру ниже или выше 38°С)




Lavelli con comando a pedale / Мойки с педальным управлением

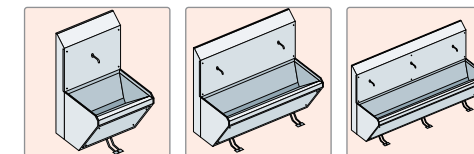


LA001(1posto/1 место) LA002(2posti/2 места) LA003(3posti/3 места)

Lavelli con comando a gomito / Мойки с локтевым смесителем

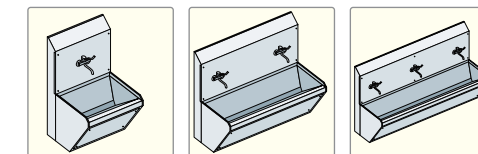

LA011(1posto/1 место) LA012(2posti/2 места) LA013(3posti/3 места)

Lavelli con comando a fotocellula / Мойки со смесителем на фотоэлементах

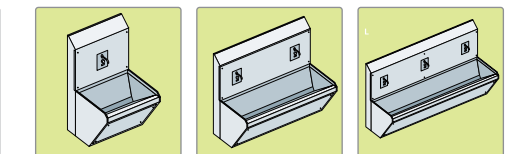

LA021(1posto/1 место) LA022(2posti/2 места) LA023(3posti/3 места)

Accessori / Аксессуары



LA100
- Erogatore di detergente liquido elettronico ad incasso
- Дозатор жидкого мыла электронный встроенный на фотоэлементах



LA105
- Erogatore di detergente liquido con comando a gomito
- Дозатор жидкого мыла механический, с локтевым нажатием



LA110
- Distributore di spazzole
- Механизм для раздачи щеток